



ODONTOLOGÍA

SILLÓN ODONTOLÓGICO M200

Determinados por la innovación
dedicado a la perfección



Address: 7950 NW R53rd
stree, valle 337, Miami Florida
331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com

Configuración		
Clasificación	Configuración	M200
Silla del paciente	Asiento de lujo con cojín de cuero de micro-fibra.	★
	Función de arranque y parada suave	★
	Diseño de silla sincronizada	★
	Sistema de bloqueo de silla	★
	Posición de silla de escupir, posición de silla de tratamiento, posición de silla de emergencia	★
	Respaldo anti colisión	★
	Motor / Pedal Multifuncional	★
Silla del control	Pantalla LCD de alta definición, con visualización digital de la presión del aire y la velocidad de rotación.	★
	Negatoscopio LCD integrado	★
	3 médicos con 9 juegos de memoria de posición del sillón	★
	Auto prueba inteligente al encender, visualización del código de error	★
Bandeja de operación	Función de calentamiento de agua de bandeja de instrumentos (Puede suministrar agua caliente a la pieza de mano y a la jeringa de 3 vías)	★
	Porta instrumentos ajustables de 6 posiciones	★
	Función anti-retracción de pieza de mano	★
	Agua-aire-electricidad con un control de interruptor de encendido/apagado	★
	Función de ajuste de agua independiente de pieza de mano	★
	Bandeja giratoria de acero inoxidable	★
Caja lateral principal	Almohadilla de silicona anti-incrustante original	★
	Caja lateral giratoria	★
	Escupidera de cerámica giratoria	★
	Tubo de agua y aire importado	★
	Filtro de agua independiente, función de filtración dual	★
Control asistente	Dos botellas para almacenar agua	★
	Jeringa de 3 vías (caliente)	★
	Panel de control de 9 teclas	★
	Succión fuerte/débil ajustable	★
Luz dental	Almohadilla de silicona antiincrustante original	★
	Luz de sensor LED (8 bombillas importadas, 3 tipos de modo de luz)	★
Caja de piso	Caja de suelo empotrada	★
	Pantalla digital de voltaje	★
	Equipado con filtro ondulado	★
Taburete dental	Taburete dental profesional (MB1)	★
Taburete auxiliar	Como taburete auxiliar (MB3)	★
Desinfección de tuberías	Sistema de desinfección automática con un solo botón	★
	Modulo de desinfección incorporado	★
	Cambio de fuente de agua con un solo botón	★
	Prueba de volumen de agua	★

Opciones	
Cuero importado seleccionado	▼
Suelo empotrado	▼
Pieza de mano de alta y baja velocidad	▼
Scaler ultrasónico y lámpara de polimerización incorporada	▼
Sistema de endoscopio, soporte para endoscopio	▼
Compresor de aire	▼

Catálogo de colores

Cojín de asiento de cuero de microfibra de lujo seleccionado



Cojín de asiento de cuero de microfibra seleccionado



Welch Medical es un fabricante profesional de equipos dentales que se dedica a la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de productos dentales.



M200



Con dispositivos de desinfección




Digital, inteligente y personalizado

Sistema de control inteligente del sillón dental MOS, para salir del trabajo fácilmente



Autoprueba inteligente al encender, visualización del código de error.

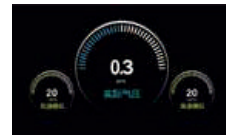

Pantalla LCD HD, con visualización digital de la presión del aire y la velocidad de rotación.



9 juegos de memoria de posición de la silla, que proporcionan una configuración personalizada de la posición de la silla.



Address: 7950 NW R53rd
stree, valle 337, Miami
Florida 331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com

M200



Abriendo una nueva era de desinfección por control por inducción



Módulo de desinfección incorporado

- Toda la cobertura de tuberías.
- Desinfección completa de todas las tuberías y circuitos internos de succión fuerte y débil.
- Funda incorporada, utilizando la función una vez abierta la cubierta.



Desinfección automática con un solo botón



- Sin intervención humana: el programa de desinfección se ejecuta automáticamente
- Ofrece interrupción durante la desinfección, desinfección continua tras el corte de corriente, recordatorio automático de falta de agua y gestión sencilla de emergencias.
- Un botón para salir del trabajo fácilmente: Una vez finalizada la desinfección automática, el sillón dental apagará automáticamente el agua y la electricidad sin ninguna operación, para garantizar la seguridad del equipo.



Diseño de dos botellas.

- Se puede verter agua por encima de la tapa, sin necesidad de desembalar la botella de forma tradicional y tediosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura máxima de la subida del sillón: 860 mm.±50mm
- Altura mínima de subida de sillón: 440 mm. ±50mm
- Tiempo de trabajo continuo
- Capacidad de carga 200 Kg.
- Modo de atenuación: 8,000 a 20,000 LUX
- Voltaje de entrada: 220V ac 50Hz/60Hz
- Presión del aire: 0.55 Mpa
- Presión de agua: 0.2 Mpa – 0.4 Mpa



Address: 7950 NW R53rd
stree, valle 337, Miami
Florida 331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com

M200

Sillón Odontológico



Pedal multifuncional:

Control de la elevación del sillón dental y el estado de funcionamiento de la pieza de mano, etc. Aspecto excepcional, sensible y duradero.



Bandeja extensible y giratoria:

Acero inoxidable, esterilizable. Puede girarse 90 grados horizontalmente, más espacio de almacenamiento.



Tensión de visualización digital, con estabilizador de tensión: Visualización directa de los dígitos, para proteger el circuito del sillón dental.



Función de calentamiento del agua de la bandeja de instrumentos:

Puede suministrar agua caliente a la pieza de mano y a la jeringa de 3 vías. Reduce eficazmente el dolor durante el tratamiento de almacenamiento.



Función anticollisión de seguridad: Parada de emergencia ante resistencia, para evitar el funcionamiento incorrecto.



Viene equipado con dos taburetes

Taburete de dentista, microfibras de cuero, con soporte lumbar.
CÓMODO Taburete de Enfermera, movimiento suave, trabajando fácilmente

8	bombillas importadas
3	tipos de modo de luz: Luz blanca, luz amarilla, luz mixta amarilla-blanca.
2	tipos de modo de funcionamiento, sensorial/manual



8-20 Lux	Alto	100.000
Brillo ajustable	Alta reproducción cromática: Excelentes y cómodos efectos de iluminación	horas de vida



Address: 7950 NW R53rd stree, valle 337, Miami Florida 331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com