



AUTOCLAVE

HORIZONTAL 200 LITROS

LEO STERI
STEAM

Características

Esterilizador horizontal controlado automáticamente, que consta de:

- Función de secado, adecuado para el secado de ropa médica y vendajes.
- Protección de sobret temperatura y sobrepresión.
- Sistema de control por microprocesador.
- Con puerta concéntrica con doble seguridad.
- Protección segura contra la falta de agua.
- Con impresora.
- Estructura completamente de acero.
- Estructura de puerta de apertura rápida tipo volante.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Pantalla digital de control con teclas de membrana.
- Entrada automática de agua, liberación de aire de refrigeración, sincronización de esterilización, liberación de aire, sincronización de secado, alarma.
- La puerta se bloquea cuando la presión interna excede 0.027MPa, con la función de enclavamiento.
- Manómetros analógicos para control de presión de cámara y chaqueta.
- Manómetros digitales para control de temperatura en cámara y chaqueta.
- Cámara de autoclave de acero inoxidable AISI 304.

Panel de Control

- Panel de control con teclado de membrana.
- Pantalla digital de Leds que muestran:
 - Temperatura de chaqueta(°C)
 - Temperatura de cámara(°C)
 - Tiempo de esterilización
- Teclado de membrana con 6 pulsadores (Arriba, abajo, Set, Ent, R y PRT)



ESTERILIZACIÓN



Address: 7950 NW R53rd
street, valle 337, Miami
Florida 331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com



AUTOCLAVE

HORIZONTAL 200 LITROS

LEO STERI
STEAM



Datos Técnicos

- Volumen de la cámara: 200L.
- Presión de trabajo: 0.05 - 0.22MPa.
- Temperatura de trabajo: 105 - 134°C.
- Presión máximo de trabajo: 0.22Mpa.
- Uniformidad de calor: ≤ 2
- Temporizador: 1 - 99Min.
- Energía/Voltaje: 9KW/AC380V.50Hz AC.
- Seguridad: Falta de agua y sobre tensión.
- Dimensiones Aprox.: 1×156×188 cm.
- Diámetro del tambor interno: Φ 51.5cm x 1m.
- Cierre de tapa tipo volante.


Alarmas

- Falta de agua
- Tensión alta
- Fin de ciclo

Accesorios

- 1 Cesta de acero con perforaciones

ESTERILIZACIÓN

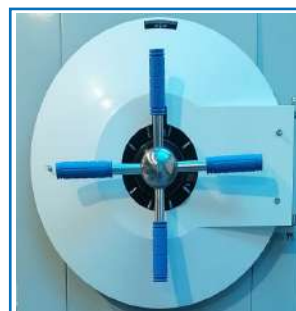

Address: 7950 NW R53rd
street, valle 337, Miami
Florida 331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com



AUTOCLAVE

HORIZONTAL 200 LITROS

LEO STERI
STEAM



ESTERILIZACIÓN



Address: 7950 NW R53rd
street, valle 337, Miami
Florida 331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com